

**MASCARILLA AUTOFILTRANTE FFP2**  
**Referencia del importador: 6751 Mascarilla Autofiltrante FFP2 Tensil** **CE 2834**  
**Referencia del fabricante: ZN9501 FFP2 NR**

Mascarilla Autofiltrante FFP2 no reutilizable según EN 149:2001+A1:2009.

**EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.**

Este producto ha sido fabricado siguiendo las exigencias del Reglamento (UE) 2016/425 para su uso básico.

Siga las instrucciones de uso y tenga en cuenta estas advertencias. En caso contrario, la efectividad de la mascarilla durante su exposición se vería reducida, lo que puede provocar un riesgo serio para su salud.

El usuario debe asegurarse de que sabe cómo usar y colocarse la mascarilla previamente. Asegúrese de que la mascarilla se encuentra en buenas condiciones antes de usarla: no está sucia, dañada, algún arnés se encuentra suelto, etc.

**Limitaciones:**

Asegúrese de no usar la mascarilla en estas condiciones:

- En una atmósfera que contenga menos del 19.5% de oxígeno.
- Si huele o saborea el contaminante.
- Si pretende protección contra gases o vapores.
- Si los contaminantes o sus concentraciones son desconocidos o inmediatamente peligrosos para la vida o la salud.
- En operaciones de arenado, pintura en spray o tratamientos con asbestos.
- En atmósferas explosivas.

**Advertencias:**

- El marcado NR sobre esta mascarilla significa que no es reutilizable, deséchala tras su uso.
- No sustituya, modifique, añada u omita componentes de la mascarilla original.
- Esta mascarilla ayuda a la protección contra ciertas partículas contaminantes, pero no elimina completamente la exposición al riesgo de contraer enfermedades o infecciones.
- Es poco probable que se alcancen los requisitos de hermeticidad si, bajo el sello facial, pasan vellos faciales.
- Cambie la mascarilla de forma inmediata si siente dificultad respiratoria o si la mascarilla se daña o se deforma.
- Cambie la mascarilla si no consigue un correcto ajuste facial.
- Cambie la mascarilla si se la quita en áreas contaminadas.

**Instrucciones de colocación:**

1. Colóquese la mascarilla en la cara en la posición correcta cubriendo nariz y boca.
2. Lleve los arneses laterales de sujeción tras las orejas, sujete los arneses con el clip adicional para mejorar la comodidad y evitar fugas.
3. Pellizque la pinza nasal para moldearla a su nariz. Asegúrese de que sus extremos apoyan contra las mejillas para obtener un buen sellado.
4. Para comprobar que el ajuste es correcto, coloque ambas manos sobre la mascarilla y exhale vigorosamente. Si el aire se filtra por el borde, reajuste la pinza hasta un sellado apropiado. Si el aire sale alrededor del borde, recolóque los arneses para un mejor ajuste.
5. Repita los pasos de ajuste hasta que la mascarilla esté sellada correctamente.
6. Si no consigue un ajuste apropiado, no se exponga a un ambiente contaminado, ya que existe riesgo para su salud.



**Almacenamiento:**

La mascarilla no debería sacarse de la bolsa hasta su uso y debe desecharse tras su uso.

Organismo Notificado: CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15, D15 AKK1, Irlanda (ON 2834).

Declaración de conformidad: Está disponible en [www.makito.es](http://www.makito.es) (consulte por referencia).

Fabricado por: Anhui Zhongnan Air Defence Works Protective Co., Ltd.  
 Qinshan Comprehensive Economic Development Zone, Anhui Province, China.  
 Marca: Zhongnan  
 Lote: V0110



Importado por: Mkto Catal Importaciones S.L.  
 Ctra. Huércal-Overa S/N 04640 Pulpi, Almería, España

Fabricado en: China

**FFP2 AUTO FILTERING MASK**  
**Importer's model: 6751 FFP2 Auto filtering mask Tensil** **CE 2834**  
**Manufacturer's model: ZN9501 FFP2 NR**

Non-reusable FFP2 filtering mask according to EN 149:2001+A1:2009.

**PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT.**

This item has been manufactured following the requirements of Regulation (EU) 2016/425 for basic use.

Failure to follow the instructions and warnings on the use of this mask during all times of exposure can reduce the effectiveness of the mask and could result in illness or disability.

As with any respiratory device, the wearer must be adequately trained prior to use. Before use, the wearer should always check the mask is in good condition- no dirt, no damage to headharness attachment, etc.

**Limitation:**

Do not use the respirator or enter or stay in a contaminated area under the following circumstances:

- Atmosphere contains less than 19.5% oxygen.
- If you smell or taste contaminant.
- For protection against gases or vapors.
- Contaminants or their concentrations are unknown or immediately dangerous to life or health.
- For sandblasting, paint-spray operations and asbestos treatment.
- In explosive atmospheres.

**Warnings:**

- This mask marked "NR", shall not be used for more than one shift.
- Never substitute, modify, add or omit parts in the configuration as specified by the manufacturer.
- This mask helps protect against certain particle contaminants but does not completely eliminate exposure to the risk of contracting disease or infection.
- It is unlikely that the requirements for leakage will be achieved if facial hair passes under the face seal.
- Change the mask immediately if breathing becomes difficult or the mask becomes damaged or distorted.
- Change the mask if a proper face seal cannot be achieved.
- Change the mask if it is removed while in the contaminated areas.

**Fitting instructions:**

1. Hold the particle filtering half mask in position over the nose and mouth.
2. Pull the headharness behind to ears, attach the headharness to the retaining clip, improve comfort and prevent leakage.
3. Ensure the nose clip is securely moulded around the nose, resting the ends against the cheek to obtain a good seal.
4. To check a proper fit, cup both hands over the mask and exhale vigorously. If air leaks around the nose, tighten the nose clip, if air leaks around the edge, reposition the headharness for better fit.
5. Repeat adjustments until the mask is sealed properly.
6. If a proper seal cannot be achieved, do not enter the contaminated area or it may cause illness.





**Storage:**

The mask should not be removed from its package unless it is required and should be discarded after use.

Notified Body: CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15, D15 AKK1, Ireland (NB 2834).

Declaration of conformity: It is available at: [www.makito.eu](http://www.makito.eu) (search for item number).

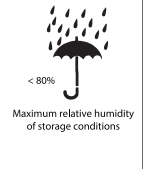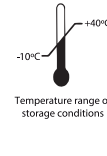

Manufactured by: Anhui Zhongnan Air Defence Works Protective Co., Ltd.  
 Qinshan Comprehensive Economic Development Zone, Anhui Province, China.  
 Trade mark: Zhongnan  
 Batch: V0110

Imported by: Mkto Catal Importaciones S.L.  
 Ctra. Huércal-Overa S/N 04640 Pulpi, Almería, Spain

Made in: China